
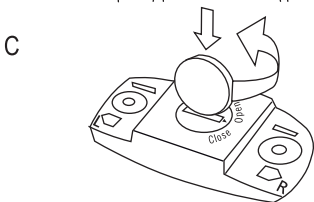
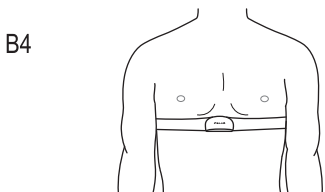
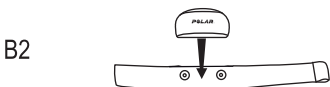
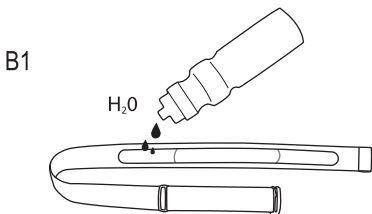


# **POLAR WEARLINK®+ HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH®**

Manual de Usuario

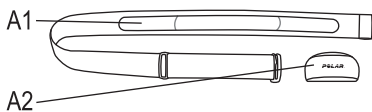

## Sensor de frecuencia cardíaca Polar WearLink® con Bluetooth®

Este Manual del usuario contiene instrucciones para el sensor de frecuencia cardíaca Polar WearLink® con **Bluetooth®**. Visita [www.polar.com](http://www.polar.com) para obtener una lista de aplicaciones compatibles.

La versión más reciente de este Manual del usuario se puede descargar de [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support). Para ver tutoriales en vídeo, visita [www.polar.com/support/video\\_tutorials](http://www.polar.com/support/video_tutorials).

Registra tu producto Polar en <http://register.polar.fi> para que podamos seguir mejorando nuestros productos y servicios, y así adaptarnos mejor a tus necesidades.

Sigue las imágenes de la portada.

## Componentes del sensor de frecuencia cardíaca

1. Las **zonas de lelectrodos** de plástico situadas en el reverso de la correa detectan la frecuencia cardíaca. Imagen A1.
2. El **conector** envía la señal de frecuencia cardíaca al dispositivo receptor. Imagen A2.

Los sensores de frecuencia cardíaca WearLink permiten entrenar en grupo sin interferencias de otros sensores de frecuencia cardíaca.

## Colocación del sensor de frecuencia cardíaca

1. Humedecer las zonas de electrodos de la correa. Imagen B1.
2. Conecta el transmisor a la banda elástica. Imagen B2.
3. Ajustar la longitud de la correa para que quede ajustada pero cómoda.

4. Fíjate la banda alrededor del pecho, justo debajo de los músculos pectorales, y fija la hebilla al otro extremo de la banda. Imagen B3.
5. Comprobar que las zonas de electrodos humedecidas queden bien apoyadas en la piel y que el logotipo Polar del conector esté en posición centrada y en posición vertical. Imagen B4.



*Retirar el conector de la correa y enjuagar la correa con agua corriente después de cada uso.*

Puedes ver instrucciones detalladas de lavado en la sección Cuidados del sensor de frecuencia cardíaca.

## Primeros Pasos

Al utilizar el sensor de frecuencia cardíaca Polar WearLink con **Bluetooth®** por primera vez, es necesario vincular el sensor de frecuencia cardíaca con el dispositivo receptor. Para más información acerca de cómo activar el sensor de frecuencia cardíaca e iniciar la aplicación, consulta las instrucciones del usuario suministradas por separado por el fabricante de la aplicación.



*En caso de que la aplicación solicite un código PIN, introduce 0000. El código PIN también está impreso en la parte posterior del conector.*

Para asegurar un rango suficiente de transmisión de tu sensor de frecuencia cardíaca al dispositivo receptor, mantén el dispositivo receptor lo más cerca posible del sensor de frecuencia cardíaca. Un buen lugar sería un bolsillo, fijado al cinturón o en una pequeña bolsa, en un lado. No llesves el receptor en la espalda (por ejemplo, en una mochila o un bolsillo trasero).

## Cuidados del sensor de frecuencia cardíaca

El sensor de frecuencia cardíaca es un instrumento de alta tecnología que debe manejarse con cuidado. Sigue las instrucciones de cuidados para asegurar una medición fiable y maximizar la vida útil del sensor de frecuencia cardíaca. Las siguientes instrucciones te ayudarán a cumplir los requisitos de la garantía.

**Conector:** Retirar el conector de la correa después de cada uso y secar el conector con un paño suave. Limpiar el conector con una solución de jabón suave y agua cada vez que sea necesario. No utilizar nunca alcohol ni otros materiales abrasivos (p. ej., lana de acero o productos químicos de limpieza).

**Correa:** Enjuagar la correa con agua corriente después de cada uso y colgarla para que se seque. Limpiar cuidadosamente la correa con una solución de jabón suave y agua cada vez que sea necesario. No utilizar jabones hidratantes, ya que pueden dejar residuos en la correa. No sumergir, planchar, limpiar en seco ni blanquear la correa. No estirar la correa ni doblar en exceso las zonas de los electrodos.

### **Secar y guardar la correa y el conector por separado, para maximizar la vida útil de la pila del sensor de frecuencia cardíaca.**

Mantener el sensor de frecuencia cardíaca en un lugar fresco y seco. No almacenar el sensor de frecuencia cardíaca cuando aún esté húmedo, no se debe guardar dentro de materiales sin ventilación, como por ejemplo una bolsa de deporte, para evitar una oxidación repentina. No exponer el sensor de frecuencia cardíaca a la luz solar directa durante periodos prolongados.



*Consulta la etiqueta de la cinta para comprobar si se puede lavar a máquina. ¡No introduzcas nunca la cinta ni el transmisor en una secadora!*

## Pilas

Todos los conectores WearLink llevan pilas sustituibles por el usuario. Para sustituir la pila, sigue las instrucciones que aparecen a continuación y observa las marcas del conector y la imagen C en la portada de este Manual del usuario.

1. Con una moneda, abre la tapa de la pila girándola hacia la izquierda, hasta la posición OPEN.
2. Inserta la pila (CR 2025) dentro de la tapa, con el lado positivo (+) orientado hacia ella. Asegúrate de que la junta de estanqueidad sigue en la ranura para garantizar la resistencia al agua.
3. Presiona de nuevo la tapa del transmisor.
4. Utiliza una moneda para girar la tapa hacia la derecha, hasta la posición CLOSE.

Al sustituir la pila, asegúrate de que la junta de estanqueidad no esté dañada. Si lo está, debes sustituirla por una nueva para asegurar la resistencia al agua del conector.

Podrás comprar estos paquetes de pila y juntas de estanqueidad en distribuidores de Polar y en puntos de servicio técnico autorizados de Polar. En EE.UU. y Canadá, las juntas de estanqueidad sólo están disponibles en puntos de servicio técnico autorizados de Polar.



*Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. Si se ingieren, ponte en contacto con un médico inmediatamente. Las pilas deben desecharse de acuerdo con las normativas locales.*

## Servicio Técnico

Durante el periodo de garantía, lleva el producto únicamente a un punto de servicio técnico autorizado de Polar. La garantía no cubre los daños provocados por servicios técnicos no autorizados. Consulta la garantía internacional

limitada de Polar.

## Precauciones

Para obtener información sobre alergias, consulta el listado de materiales en las Especificaciones técnicas. Para evitar reacciones alérgicas, coloca el sensor de frecuencia cardíaca por encima de una camiseta, humedeciendo la zona bajo los electrodos.



*El impacto de la combinación de humedad y abrasión intensa puede provocar que aparezca un color negro en la superficie del sensor de frecuencia cardíaca, que posiblemente manche las prendas de colores claros. Si aplicas perfume o repelente de insectos en la piel, debes asegurarte de que no entre en contacto con el sensor de frecuencia cardíaca.*

## Utilización del sensor de frecuencia cardíaca en el agua

El sensor de frecuencia cardíaca Polar WearLink con **Bluetooth®** es resistente al agua pero no mide la frecuencia cardíaca en el agua.

## Especificaciones Técnicas

Tipo de pila: CR 2025

Junta de estanquidad de la pila: Junta tórica  
20,0 x 1,0 material FPM

Vida útil de la pila de WearLink con  
**Bluetooth®**: 150 horas de uso

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +50  
°C / de 32 °F a 122 °F

Material del conector: Poliamida

Material de la correa: 38% poliamida, 29%  
poliuretano, 20% elastano, 13% poliéster

Compatibilidad: El sensor de frecuencia  
cardíaca Polar WearLink con **Bluetooth®** no es  
compatible con los training computers Polar.



*Si se coloca el sensor de frecuencia cardíaca  
directamente sobre la piel, debajo de la ropa,  
la temperatura de funcionamiento es de -10  
°C a +50 °C / de 14 °F a 122 °F.*



## Garantía y Limitación de responsabilidades

- Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable y vigente ni a los derechos del consumidor frente al vendedor contraídos a partir del contrato de compraventa.
- Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Inc. para los consumidores que han adquirido este producto en EE.UU. o Canadá. Esta garantía internacional limitada ha sido emitida por Polar Electro Oy para los consumidores que han adquirido este producto Polar en otros países.
- Esta garantía de Polar Electro Inc./Polar Electro Oy cubre al comprador/consumidor original de este producto de cualquier fallo o defecto de material y mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- **¡El recibo de la compra original es tu prueba de compra!**
- Esta garantía no cubre la pila, el desgaste normal, daños debidos a un uso indebido, mal uso, accidentes o el incumplimiento de las precauciones; mantenimiento inadecuado, uso comercial, estuches/pantallas, brazaletes, correas elásticas y ropa Polar rajados, rotos o con arañazos.
- Esta garantía no cubre ningún daño, pérdida, costes o gastos directos, indirectos o imprevistos, resultantes o especiales, que hayan surgido o estén relacionados con el producto.
- Los artículos adquiridos de segunda mano no están cubiertos por la garantía de dos (2) años, a no ser que la legislación local estipule lo contrario.
- Durante el periodo de garantía, el producto será reparado o sustituido en cualquiera de los Centros de servicio Polar, independientemente del país en el que se adquirió.

La garantía relativa a cualquier producto estará limitada a aquellos países en los que se vendió inicialmente el producto.

# CE 0537

Este producto cumple con las Directivas 93/42/CEE, 1999/5/CE y 2011/65/EU. La Declaración de conformidad correspondiente está disponible en [www.support.polar.com/declaration\\_of\\_conformity.html](http://www.support.polar.com/declaration_of_conformity.html).

La información regulatoria está disponible en [www.polar.com/support](http://www.polar.com/support).



Este icono de un contenedor tachado indica que los productos Polar son dispositivos electrónicos y se rigen por la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y que las pilas y acumuladores utilizados en dichos productos se rigen por la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. Por tanto estos productos, sus pilas y acumuladores se deben desechar por separado en los países de la UE.



Esta marca indica que el producto está protegido contra descargas eléctricas.

**ID de diseño de Bluetooth: B014698**

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy es una compañía con certificación ISO 9001:2008.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de este manual en forma alguna o por cualquier medio sin la autorización previa y por escrito de Polar Electro Oy. Las denominaciones y logotipos marcados con un símbolo <sup>TM</sup> en este manual del usuario o en el embalaje de este producto son marcas comerciales de la empresa Polar Electro Oy. Las denominaciones y logotipos marcados con un símbolo ® que aparecen en este Manual del usuario o en el paquete de este producto son marcas registradas de Polar Electro Oy, a excepción de Windows, que es una marca registrada de Microsoft Corporation.

## **Descargo de responsabilidad**

Polar Electro Inc./Polar Electro Oy rechaza cualquier responsabilidad relacionada con o derivada de productos o servicios de terceros que utilicen los datos generados por un producto Polar. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy rechaza cualquier responsabilidad relacionada con o derivada del funcionamiento correcto o incorrecto de cualquier producto o servicio de un tercero, su interoperabilidad con un producto Polar, la seguridad de cualquier producto o servicio de un tercero y cualquier otra responsabilidad relacionada con o derivada de un producto o un servicio de un tercero. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy no se hará responsable de ninguna suma de dinero que deba pagarse por la transferencia de datos ni de ningún otro importe que pueda deberse a o estar relacionado con el uso de este producto Polar.

Este producto está protegido por los derechos intangibles de Polar Electro Oy, definidos en los siguientes documentos: FI110915, US7324841, EP1362829, FI23471, US D492783S, US D492784S, US D492999S, EU00046107-0001, EU00046107-0002, EU00046107-0003, FI96380, US5611346, EP0665947, JP3568954, FI115084, US7418237, EP1543769. Otras patentes en curso.

[www.polar.com](http://www.polar.com)

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

[www.polar.com](http://www.polar.com)



***LISTEN TO YOUR BODY***